

イオン水のパワーが、あなたをリフレッシュ。



連続式電解水生成器

# Alkari Fresh

アルカリフレッシュ



AF-6000  
twoway type

医療用具製造承認番号21400BZZ00385

鉛も除去する高性能タイプ。




薄膜式電解水生成器

# Alkari Fresh

アルカリフレッシュ

## 高性能電解槽だから実現する、 驚異のイオン水パワー。

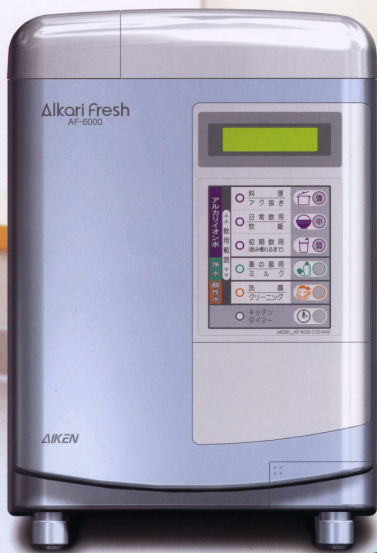

Alkari Fresh  
AF-6000



*AF-6000*  
*two way type*

医療用具製造承認番号21400BZZ00385

DAIKEN


## 体の酸化を防止する還元力を持つアルカリフレッシュの【イオン水】とは…



私たちの日常生活において、老化やストレス・疲労が重なると、人体は「酸化」されます。「酸化」とは、肉や魚が腐ったり、金属が錆びていくのと同じ原理です。つまり「酸化」が進むと健康を損ねるということです。では、この「酸化」を防ぐ手立てはないのでしょうか？【アルカリフレッシュ】で生成された【イオン水】なら「酸化」を防ぐことができます。水道水が高性能浄水フィルターを通り、電解槽で電気分解されると、溶存酸素の多いアルカリ性の【還元力】を持った【イオン水】が生成されます。【イオン水】は、人体の酸化を防止し、さらに人体に発生する過剰な活性酸素を除去するといわれています。また、【イオン水】は、体内に吸収されやすく、口当たりも柔らかい高機能水。あなたとご家族の健康促進のために、まず水から始めてみませんか？

### twoway type 2ウェイ方式

蛇口のcockから生成した水が使えます。

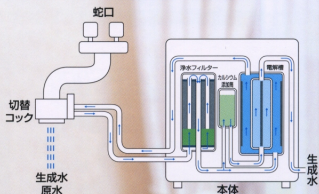

## イオン水を生成する大型高性能電解槽。 長年蓄積された技術とノウハウがパワーを発揮します。



天然水の約7倍。酸化還元電位-700mV/maxを実現。



業界トップクラスの電解性能により、最大-700mV前後もの酸化還元電位をもつイオン水を生成します。※酸化還元電位は、東亜KDDORP計RM-20Pで測定。水質・水温・通水量により数値は異なります。

色々々の酸化還元電位を調べると…

水道水	市販のミネラルウォーター	天然水	アルカリフレッシュのイオン水
400～700mV	200～400mV	-100～200mV	-700mV

電源はハイパワー設計。電解レベルは水質の違いに対応できる調整機能付き。

高性能な電源部で、ハイパワーな電流を送電。電解電流の向上と6段階の電解レベル調整機能により、広範囲の水質に対応でき、安定した電解性能を誇ります。

使い方によって可変できる、取水バランス調整機能。

アルカリイオン水(還元水)と酸性イオン水の取水バランス(標準3:1)を2:1に可変できます。還元電位をより低くすることができます。

## 水の汚れを逃さずキャッチ。 抗菌性能を高めた、カートリッジ式浄水フィルター搭載。



最新のろ過材で、ピュアな浄水も使えます。

水道水が電解槽に入る前にこの浄水フィルターを通過しますので、きれいでフレッシュな【アルカリイオン水】を生成できます。もちろん浄水のみでの使用もでき、赤ちゃんのミルクや薬の服用にも最適です。

健康によい水を生成します。



銀添着の抗菌活性炭と鉛除去用の特殊繊維フィルターで、塩素臭などの臭いはもちろん、トリハロメタン等の有害物質も除去。さらに水の中の溶解性鉛までも除去し、ヘルシーで美味しい水を生成します。

長寿命型の浄水フィルターです。

浄水フィルターの寿命は、30トン(30,000リットル※残留塩素除去能力)もの長寿命型。1日40リットルの使用で、約2年間お使いいただけます。

※寿命は、水質により異なります。




## 充実の機能を標準搭載。しかも操作は簡単に行えます。



見て分かる液晶表示と、ボタンだけの簡単操作。

操作した項目を液晶で表示しますので安心して操作が行えます。操作もボタンで5種類の水を選ぶだけでOK。またメロディやチャイム音で、生成水の種類をお知らせする機能も搭載しています。

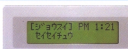

初期飲用は弱モードから。

アルカリイオン水を初めて飲用される方は、弱モードからの飲用をおすすめします。

その他にも便利な機能を満載しています。

お料理にうれしい「キッチンタイマー(1～60分)」をはじめ、液晶時計や生成水量・電解電流値・積算通水量表示機能などを標準搭載しています。

# アルカリフレッシュは、健康・美容に役立つ3種類の水が生成できます。

## 健康に良い水。アルカリイオン水

アルカリ性のイオン水は、飲むことで胃腸に良い効果があります。



強



煮物・アク抜き・スープに 食材のアク抜きも短時間ででき、煮物やスープもまろやかで色鮮やかになります。



中

飲用・調理・炊飯・お茶・水割りに

直接の飲用で胃腸のトラブルに。炊飯に使えば、ふっくらと美味しくなります。またお茶等も味の濃い美味しいものになります。



【弱】と【中】は、直接飲用できます。

アルカリイオン水の効果・効能

胃酸過多

慢性下痢

胃腸内異常発酵

制酸

消化不良



弱

胃腸にいい水として、飲みはじめに

アルカリイオン水をはじめて飲用される方はここからどうぞ。消化を助け、胃への負担を軽減してくれます。



## 清潔でピュアな水。塩素のないやさしい水。浄水

水に含まれる有害物質は除去、でも体に良いミネラルはそのままにして生成されます。



赤ちゃんのミルク・薬の服用に

赤ちゃんのミルク用の水や薬の服用に最適な、清潔で安全な浄水を使うことができます。

## 美容に良い水。アストリンゼント。酸性イオン水

酸性水は、肌を引き締める効果がありますので、美肌を求める方にどうぞ。



お肌・髪的美容に

肌や髪はもともと弱酸性。だから同じ性質の水を使えば、効果的。お化粧のノリも違ってきます。

連続式電解水生成器

# Alkari Fresh

## アルカリフレッシュ



### 製品仕様



**AF-6000**  
*twoway type*

医療用具製造承認番号  
21400BZZ00385



商品名	アルカリフレッシュ AF-6000
型式	AF-6000CV2
定格電源	AC100V 50/60Hz
生成pH値	アルカリイオン水/pH8.0~10.0 酸性イオン水/pH4.0~6.0
生成量	約1~4.5リットル/分
給水方式	水道直結型
給水	水道水または飲用適合水 (MAX6.0リットル/分)
使用可能水圧	~0.5Mpa
最高使用温度	40℃ (温度センサー付)
浄水器・ろ過材料	抗菌活性炭・フィルター式
浄水器・処理水量	30トン (鉛除去・水質により異なります) ※ 排水残留塩素20ppmとして0.4ppmに達するまでの通水量
保護装置	過電流制御回路、過熱防止装置、熱水検出警報
外形寸法	幅240mm×奥行160mm×高さ350mm
製品重量	約5.0kg
設置	キッチン・流し台等に据置き
付属品	2ウェイ給水ホース、排水ホース、グリセロリン酸カルシウム、 切替コック、取扱説明書、保証書、pH試験液セット
交換・補充	浄水フィルター、pH試験液

標準価格 386,400円 (本体価格 368,000円)



### 安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

- アルカリイオン水を飲用するときには、次のことに注意して下さい。
  - 医薬品をアルカリイオン水で飲用しないで下さい。 ■痛風症の方は、アルカリイオン水を飲用しないで下さい。
  - 飲用して身体に異常を感じたとき、または飲用し続けても症状が改善の見られない場合は、医師または薬剤師に相談して下さい。
- 次のような方は使用する前に医師または薬剤師とご相談下さい。
  - 持病のある方、または身体の弱っている方。 ■医師または歯科医師の治療を受けている方。
- 次の方は酸性イオン水(アストリンゼント)を使用する前に医師または薬剤師とご相談下さい。
  - 肌の弱い方。 ■アレルギー体質の方。
- 初めてご飲用される方は、pHが中性に近い水を少量ずつ飲用し、その後体調に合わせてpH・飲用量を調整してお飲み下さい。
- 本器は日本国内の飲用可能な水を対象としております。

### 使用上のご注意

- 水道法の水質基準に不適合な原水は処理できません。
- 硬水を軟水に変えることはできません。
- 地域によって塩素除去能力の寿命に多少の差があります。

※掲載されている商品の仕様及び外観は、改良のため、予告なく変更することがあります。

- お問い合わせは