

SANASTEC

SANAS
KS-30GS

還元水連続生成器

管理医療機器製造販売認定 中国

TYH-71

シンプルデザイン、パワフル電解。



液晶ディスプレイが
色と文字でお知らせ

本体力カバーの色が
選べる(オプション)



各色 ¥5,040 (税込)

*色は標準のシルバーの他、イエロー・ワインレッド・グリーンの3種類(オプション)

きれいだけの水から体にいい水、環境にやさしい水へ。
用途に合わせて最適な水を連続生成します。



健康の水

還元水 (pH8.5～9.5) 飲用

活性作用
ものを柔らかくする
ものの力を弱め、引き出す
水が柔軟するまでの
時間が短い

- ・炊飯に
- ・お茶・コーヒー・紅茶に
- ・ゴボウなどアツの強い野菜のアツ抜きに
- ・煮物料理に
- ・和食のダシに
- ・豆類の煮物に
- ・焼酎・ウィスキーなどのお酒の水割りに

還元水は、飲用することにより、青面症状の改善に効果があることが認められています。



良質の水

淨水 (pH7.0) 飲用

活性作用
カルキやサビ、にごりを
取り除く作用

- ・残留塩素や、臭気・サビなどを
除去した淨水
- ・薬の服用に
- ・赤ちゃんのミルクづくりに



美容の水

酸性水 (pH6.0) ▲飲用はできません

活性化作用
もの有利な働き
もの有利な働き

- ・弱酸性の健康なお肌にする
美容水として
- ・髪の筋で水に
- ・天ぷらの衣に
- ・洗浄水として



パワフルな電解槽を搭載。よい水をたっぷり作ります。

電解槽に、チタン白金メッキの電極を使用した電極板を搭載して、ORP+1130mV～-800mV以下のすぐれた電解水をたっぷりつくります。（生成水の選択、および水質により異なります。）



マイコンが水質に合わせて自動的に電流をコントロールしますので、水量が少ない場合でも安定したpH値が得られます。

余裕の処理能力

電解槽により、たっぷりの還元水や酸性水を生成します。また、還元水の場合、常温時で約60分間、連続使用が可能です。

便利な自動洗浄機能

定期的に自動洗浄をおこない、電極に付着したカルシウムなどを取り除きます。

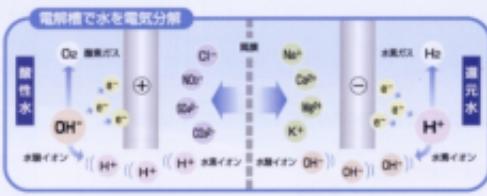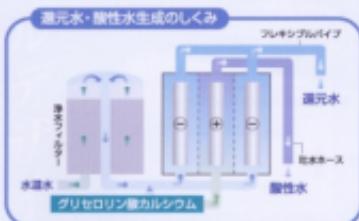

①極では、水分子から電子が放出され酸素が発生し、水素イオン濃度が高くなって酸性となり、②極では、水分子から水素が水素イオンが発生し、アルカリ性（還元）になります。

使いやすい操作パネル。



液晶ディスプレイ

選んだポジションの水を色と文字で表示します。

選元水 強	選元水 中	選元水 弱
■[電解槽 3 インターステイ]	■[電解槽 2 インターステイ]	■[電解槽 1 インターステイ]
酸性水	浄水	フィルター交換
■[電解槽 1 脱イオン化]	■[浄水 ダラスイ]	■[フィルター クリーン]

電源スイッチ

ON-OFFの操作を行います。

本体のデザインがシンプル設計。

場所をとらない省スペース・軽量タイプで、本体裏面のデザインもスッキリ。また、壁掛け設置（オプション部材）も可能です。



おいしい水をつくる 三層の高性能浄水フィルター。

浄水フィルターの寿命は、総通水量約12,000リットル。1日約60リットルの使用で約1年が目安です。（水質・水量により異なります。）交換時期は液晶ディスプレイ、アラーム音でお知らせします。三層の高性能浄水フィルターが、塩素・余氯・カルキ、臭味、赤サビ、ニゴリなどを除去しながら、ミネラル成分は通過します。




フレキシブルパイプから還元水が出ている時は、吐水ホースから酸性水が出ます。

酸性水に切り替えた時のみ、フレキシブルパイプから酸性水が吐出されます。

サナスKS-30GSのパワフル&便利機能

寸法図 (mm)

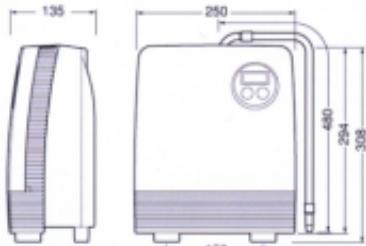

ほとんどの蛇口に、分岐栓の取付けが可能。特別な工事は不要です。

分岐栓の取付け方法例



ワンタッチ操作の便利なシャワー付分岐栓



安全に関するご注意 安全にご使用いただくために、以下のことを必ずお守りください。

警告

- 次の方は薬剤水を使用する前に医師または薬剤師に相談してください。
 - 薬剤治療を受けている方
 - プロテイン・アーリー・エリムの方
- 薬剤水を使用して前に異常を感じたときは、速やかに使用を中止して医師に相談してください。
- 生活した薬剤水を飲用する場合、次のことに注意してください。
 - 薬剤治療を受けている方
 - 薬剤治療を受けている方（腎臓病など）（腎臓病の人人は、飲用しないでください）
 - お子様（乳児、カシラム等）は「腎臓病など」（腎臓病の人人は、飲用しないでください）
 - 飲む（飲）水：薬剤水を飲む（飲）水は、必ずはくち（吸）入（飲）めても瓶底に沈着が付かない時は、飲む（飲）水として飲用してください。
 - 薬剤治療を受けている人、特に（乳児、カシラム等）である人および、身体に異常を感じている人は、飲用前の医師（薬剤師）に相談してください。
 - ミルクや、乳児用食品は薬剤水を使用しないでください。

- 本カタログ掲載商品の標準価格には、配達費・設置調整費・工事費・使用済み商品の引き取り費用等は含まれておません。
- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので了承ください。
- 田園地帯と実物とは多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- このカタログの掲載商品の有効については、販売店または当社におたずねください。
- この商品には、保証書を添付しております。保証書は販売店にて所定事項を記入の上、発行いたしますので記載内容をご確認いただき大切に保存してください。

注意

- 初めて薬剤水を飲用でご使用になる場合。
 - シャワーフ付分岐栓 ■ フィルター交換ラベル ■ 取扱い（1冊）
 - アダプターセット（ボンベキャップアダプター／内蔵式キャップアダプター／丸型端口用アダプター／取り付け用）
 - pH測定液セット（pH試験液・清掃カッブ・pH比色紙） ■ クリセロリン要ガルシウム（1kg）
 - 取扱説明書 ■ 保証書
- 児童などの症状が出た場合。
 - アレルギー性の人は、発疹などの症状が出る場合があります。その場合、飲用を中止し医師にご相談ください。
 - 本カタログ掲載商品は日本国内でご使用ください。
 - 水温水など飲料水として合格した水でご使用ください。
 - 元止め式瞬間湯沸器には使用しないでください。

販売店



ISO13485:2003
ISO14001:2004
認証取得企業です。

製造・発売元

サンステック 株式会社

〒578-0017 大阪府交野市南台1丁目38番17号
TEL.072-810-8227(代)
FAX.072-893-2907